


STANDARD™ F

Test disponibles para Analizadores Standard F

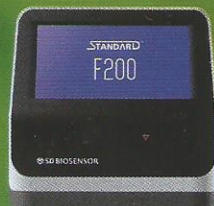

Test Standard F

Categoría	Código	Test	Tipo de muestra	Volumen de muestra	Tiempo de espera	Tipo	Unidades
Enfermedades respiratorias	10INF10D	Influenza A / B FIA	Hisopado nasal	-	1,5 - 10 min	CL	25
	10RSV10D	RSV Ag FIA	Hisopado nasofaríngeo	-	5 - 15 min	CL	25
	10STR10D	Strep A Ag FIA	Hisopado de garganta	100 µl	5 min	CL	25
	10LEG10D	Legionella Ag FIA	Orina	-	5 - 15 min	CL	25
Enfermedades transmitidas por Vectores	10SPN10D	S. pneumoniae Ag FIA	Orina	100 µl	5 - 10 min	CL	25
	10ZK100	Zika Ag FIA	Sangre entera / suero / plasma	100 µl	15 min	CL	25
	10ZK20D	Zika IgM / IgG FIA	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	25
	10DEN10D	Dengue NS1 Ag FIA	Sangre entera / suero / plasma	100 µl	15 min	CL	25
	10DEN20D	Dengue IgM/IgG FIA	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	25
	10CH110D	Chikungunya IgM / IgG	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	25
Hepatitis	10HCV101D	HCV FIA	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	25
Marcadores cardíacos	10CKM1013	CK-MB FIA	Sangre entera / Plasma	100 µl	15 min	CN	20
	10TN110B	TnI FIA	Sangre entera / Plasma	100 µl	15 min	CN	20
	10HSC10B	hs-CRP	Sangre entera / suero / plasma	5 µl	3 min	CN	20
	10DD11013	D-dimer FIA	Sangre entera / Plasma	10 µl	3 min	CN	20
Inflamación	10CRP 10B	CRP	Sangre entera / suero / plasma	5 µl	3 min	CN	20
	10PCT10B	PCT FIA (Serum)	Suero	50 µl	15 min	CN	20
	10PCT20B	PCT FIA	Sangre entera / suero / plasma	100 µl	15 min	CN	20
Enfermedades crónicas	10A1C10B	HbA1c	Sangre entera	5 µl	3 min	CN	20
	10UAL10B	U-Albumin FIA	Orina	3 µl	5 min	CN	20
Hormonales	10BHCT0B	hCG FIA	Sangre entera / Suero	100 µl	SE: 10 mins S: 5 mins	CN	20
	10TSH 10B	TSH FIA	Suero / Plasma	100 µl	15 min	CN	20
Marcadores tumorales	10PSA1013	PSA FIA	Sangre entera / suero / plasma	SE: 10 µl S/P: 100 µl	10 min	CN	20

*CN: Cuantitativo / CL: Cualitativo / SE: Sangre entera / S: Suero / P: Plasma

Controles Standard F

Código	Descripción	Kit de prueba
10INFC10	Influenza A/B Control	10T / kit
10RSVC10	RSV Ag Control	10T / kit
10STRC10	Strep A Ag Control	10T / kit
10LEGC10	Legionella Ag Control	10T / kit
10SPNC10	S.pneumoniae Ag Control	10T / kit


Código	Descripción	Kit de prueba
03ACSC10	SDB HbA1c Control	10T / kit
10UALC10	U-Albumin Control	10T / kit
03CCSC10	SDB CRP Control	10T / kit
10PCTC10	PCT Control	10T / kit

*Temperatura de almacenamiento: 2-30 °C

Disponible pronto:

HIV-1/2 Ab, HBsAg, Adenovirus Ag, C. difficile A/B GDH, Vitamina D, Cistatina C, AFP, CEA, FOB, LH, T3, T4

Ventajas del STANDARD F

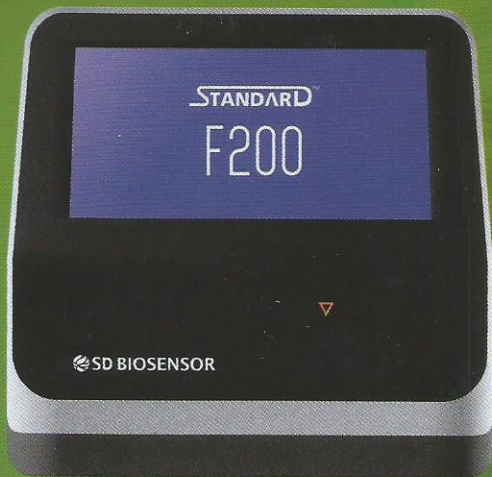

6. Conocimiento de ID

STANDARD F imprime el ID del paciente escrito en el dispositivo, lo que permite disminuir errores pre y post analíticos.

1. Simple y fácil de utilizar

Plataforma de prueba de flujo lateral con opción de incubación y lectura / solo lectura

2. Inmunoensayo fluorescente basado en Europio

Ensayos rápidos de alta sensibilidad y especificidad ahora son posibles gracias a la fluorescencia basada en el elemento Europio.

3. Acceso aleatorio a través del sistema de código de barras 2D.

Reconocimiento automático del dispositivo de prueba (Ensayo, N° de lote, número de serie, información de codificación, fecha de caducidad)

4. Control de calidad interno

Control de calidad en ensayo específico y en dispositivo de prueba.

5. Almacenamiento


Los dispositivos de prueba pueden almacenarse a temperatura ambiente (2 - 30 °C)

Procedimiento de uso

Modo TEST STANDARD: Procedimiento automatizado para 1 sola prueba



1: Inserte la tira para iniciar el procesamiento de prueba.

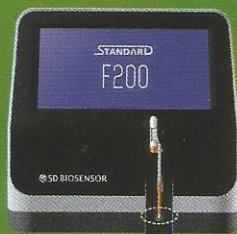

2: Aplique la muestra en la tira.



3: Lea el resultado cuando haya finalizado. Los tiempos de incubación se encuentran en el inserto.

Modo LECTURA (solamente para artículos de prueba cualitativa): Procedimiento de alto rendimiento para múltiples pruebas



1: Aplique la muestra en una tira.



2: Deje la tira fuera del analizador. Espere el tiempo requerido en el inserto.



3: Inserte la tira en el analizador. La lectura demorará menos de 1 minuto.